

NETTI 4U CED/CEDS

Artikkelnr. / Item no. / Artikel nr.	
43799	35-60 cm

N Verktøy: Stjerneskrudjern, saks



1. Vipp av plastproppene i ryggørørene.
2. Skru ut skruen som fester velcroen til ryggørret.
3. Sett ryggforlengeren ned i ryggørret.
4. Monter tilbake skruen som fester velcroen til ryggørret. Skruen skal gå inn i ryggforlengerens forborede hull i ønsket høydeposisjon.
NB! Pass på at forlengeren dekker den øvre del av ryggputen i bakkant. Øvre del av ryggforlengerprofilene skal ligge rett i underkant av de skalerte hjørnene på ryggputen.
5. Fest velcroflippene mot hverandre.
6. Klipp av overskytende tekstil for å frigjøre festevelcroen mot ryggputen.
7. Monter ryggputen. Se separat monteringsanvisning.

GB Tools: Cross-headed screw driver, scissors

1. Remove plastic plugs from backrest tube ends.
2. Remove screw attaching the velcro to the backrest tubes.
3. Insert the backrest extender into the backrest tube.
4. Re-mount the screw attaching the velcro to the backrest tubes. The screw should enter the pre-drilled holes in the backrest extender in required height position.
NB! Ensure that the extender velcro is covering the top section of the cushion. The top end of the backrest extender profiles should be placed right below the cut corners.
5. Attach the two loose velcro flips in centre.
6. Cut surplus material to release the attachment velcro against the backrest cushion.
7. Mount the backrest. See separate mounting description.

DE Werkzeuge: Kreuz-Schraubendreher, Schere

1. Entfernen Sie die Plastikabdeckungen von den Rückenrohr-Enden oben.
2. Entfernen Sie die Kreuzschlitz-Schrauben links und rechts die zur Fixierung des einstellbaren Gurtrückens dienen.
3. Stecken Sie nun die Rückenverlängerungsrohre in die Rückenrohre.
4. In den Rückenverlängerungsrohren befinden sich vorgebohrte Löcher zur Einstellung der gewünschten Höhe. Schrauben Sie nun die Kreuzschlitzschrauben wieder in die Rückenrohre und achten Sie darauf, dass die Schrauben mit dem vorgebohrten Loch in den Rückenverlängerungs-Rohren übereinstimmen.
Achten Sie darauf, dass sich die Oberkante des Rückenverlängerungs-Velcro unterhalb der gerundeten Ecken des Rückenkissens befindet.
5. Schieben Sie die 2 Velcro-Einzelstücke links und rechts über die Rückenverlängerungsrohre.
6. Schneiden Sie nicht benötigtes Material an den vertikalen Nähten entlang ab, sodass sich die beiden Einzelteile mittels der Klettstreifen fest verbinden.
7. Platzieren Sie nun das Rückenkissen. Siehe separate Montageanleitung.

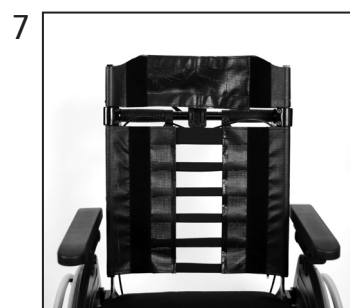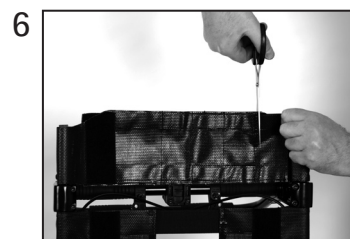

NETTI I/III/III

Artikkelnr. / Item no. / Artikel nr.

43799

35-60 cm

N Verktøy: Stjerneskrudjern, 4 mm unbrakonøkkel, nebbetang, saks

1. Vipp av plastproppene i ryggørerne.
2. Skru ut skruen som fester skyvebøylebraketten til ryggørret med en unbrakonøkkel, mens mutteren på rørets innside holdes igjen med en nebbetang.
3. Fjern mutteren.
4. Skru ut skruen som fester velcroen til ryggørret.
5. Monter tilbake skruen i skyvebøylebraketten. Denne festes til mutteren som løper fritt inne i ryggforlengerens profil. La den være løs.
6. Monter tilbake skruen som fester velcroen til ryggørret. Skruen skal gå inn i ryggforlengerens forborede hull i ønsket høydeposisjon.
NB! Pass på at forlengeren dekker den øvre del av ryggputen i bakkant. Øvre del av ryggforlengerprofilene skal ligge rett i underkant av de skalerte hjørnene på ryggputen. Dra til skruen beskrevet under pkt 5.
7. Fest velcroflippene mot hverandre og klipp av overskytende tekstil for å frigjøre festevelcroen mot ryggputen.
8. Monter ryggputen. Se separat monteringsanvisning.

GB Tools: Cross-headed screw driver, 4 mm Allen key, pliers, scissors

1. Remove plastic plugs from backrest tube ends.
2. Remove the screw attaching the push bow bracket to the backrest tubes with an Allen key, while fixing the nut on the inside with a pair of pliers.
3. Remove the nut.
4. Remove screw attaching the velcro to the backrest tubes.
5. Re-mount the screw in the push bow bracket. It is fixed to the loose square nut in the profile of the backrest extender. Let it be loose.
6. Re-mount the screw attaching the velcro to the backrest tubes. The screw should enter the pre-drilled holes in the backrest extender in required height position.
NB! Ensure that the extender velcro is covering the top section of the cushion. The top end of the backrest extender profiles should be placed right below the cut corners. Fix the screw described in point 5.
7. Attach the two loose velcro flips in centre, and cut surplus material to release the attachment velcro against the backrest cushion.
8. Mount the backrest. See separate mounting description.

DE Werkzeuge: Kreuz-Schraubendreher, 4mm Inbusschlüssel, kleine Zange, Schere

1. Entfernen Sie die Plastikabdeckungen von den Rückenrohr-Enden oben.
2. Im Rückenrohr oben innen sehen Sie eine kleine quadratische Mutter. Halten Sie diese mit der Zange fest und schrauben Sie die außen befindliche Inbusschraube aus der Mutter heraus.
3. Entfernen Sie die Mutter.
4. Entfernen Sie die Kreuzschlitz-Schrauben links und rechts die zur Fixierung des einstellbaren Gurtrückens dienen.
5. Schrauben Sie die Inbusschraube wieder so weit in das Rückenrohr hinein, dass die Rückenverlängerung mühelos eingeschoben werden kann.
6. In den Rückenverlängerungsröhen befinden sich vorgebohrte Löcher zur Einstellung der gewünschten Höhe. Schrauben Sie nun die Kreuzschlitzschrauben wieder in die Rückenrohre und achten Sie darauf, dass die Schrauben mit dem vorgebohrten Loch in den Rückenverlängerungs-Röhren übereinstimmen.
Achtung: Achten Sie darauf, dass sich die Oberkante des Rückenverlängerungs-Velcro unterhalb der gerundeten Ecken des Rückenkissens befindet.
Ziehen Sie nun die Inbusschraube fest an. Achten Sie darauf, dass Sie die in der Rückenverlängerung befindliche Mutter fassen.
7. Schieben Sie die 2 Velcro-Einzelstücke links und rechts über die Rückenverlängerungsröhre und schneiden Sie nicht benötigtes Material an den vertikalen Nähten entlang ab, sodass sich die beiden Einzelteile mittels der Klettstreifen fest verbinden.
8. Platzieren Sie nun das Rückenkissen. Siehe separate Montageanleitung.

